

マスク本体と異なる色相の耳ひもを採用、マスク選びの選択肢が拡大

『シャープクリスタルマスク（ふつうサイズ）』に バイカラー※¹モデルを追加



左：本体 ベージュ系／耳ひも グリーン系、右：本体 ピンク系／耳ひも レッド系
●製品の色味は画面の見え方により、実際と異なる場合があります。

『シャープクリスタルマスク』は、プレミアムタイプの不織布マスクとして、快適性や衛生面（防御力）、着用時の美しさを追求し、2021年9月の発売以来、多くの皆様からご支持をいただきました。今回、「服装に合わせてマスクを選びたい」「その日の気分に合わせてマスクを着用したい」といったお声に応え、本日5月15日より、『シャープクリスタルマスク（ふつうサイズ）』に2種類のバイカラーモデルを追加し、当社ECサイト（COCORO STORE）にて販売を開始します。

発売するバイカラーモデルは各14枚入りとし、服装や気分に応じて使い分けられるように、(1) ベージュ系のマスク本体に、グリーン系（アイビーグリーン）およびレッド系（ワインレッド）の耳ひもを7枚ずつセットにしたタイプ、(2) ピンク系のマスク本体に、グレー系（スカイグレー）およびレッド系（ワインレッド）の耳ひもを7枚ずつセットにしたタイプ、の2種類をご用意しました。

新開発の耳ひもは、服装や装飾とも組み合わせやすい色相とし、これまで同様、伸縮性が高くつけ心地のよい平たいタイプを採用しました。光があたると光沢が増し、艶やかさも際立つマスク本体と相まって、普段使いしやすい上品な色合いのマスクに仕上げています。

商品名／『愛称』	<形名>		マスク枚数	販売形態と価格 (税込・送料無料)	発売日
	本体色	耳ひも色			
不織布マスク ／ 『シャープ クリスタルマスク (ふつうサイズ)』	(1)	<MA-C215-CX>		14枚 入り	【通常販売】 1,880円 【マスク定期便サービス 利用者向け特別販売※ ² 】 1,720円
		ベージュ系	グリーン系 ×7枚 レッド系 ×7枚		
	(2)	<MA-C215-PX>			
		ピンク系	グレー系 ×7枚 レッド系 ×7枚		

● マスクは感染（侵入）を完全に防ぐものではありません。

■ 主な特長

1. マスク本体と異なる色相の耳ひもを採用、マスク選びの選択肢が拡大
2. 口元の空間をしっかりと確保。呼吸しやすく快適なつけ心地を実現
3. 花粉やウイルス飛沫などを99%以上カットするフィルターや抗菌加工※³の採用で衛生的

※¹ 1つのアイテムの中に、2つの色を使用しているものです。

※² マスク定期便サービス（全マスクタイプ、全サイズ）利用者が対象です。次回のお届け商品を、1回のみ本品（ふつうサイズ、バイカラーモデル）に変更できます。次々回以降は、元の商品のお届けとなります。また、変更対象月については、元の商品の代金は不要であり、本バイカラーモデルの代金（1,720円）のみとなります。

※³ 抗菌加工部位（最外層の不織布）の表面での細菌の増殖を抑制します。すべての細菌の増殖を抑制するものではありません。

【 ホームページ 】 <https://corporate.jp.sharp/>（画像ダウンロード <https://corporate.jp.sharp/press/>）

【 本 社 】 〒590-8522 大阪府堺市堺区匠町1番地

【 お問い合わせ先 】 お客様ご相談窓口 ☎ 0120-227-488

■ 主な特長

1. マスク本体と異なる色相の耳ひもを採用、マスク選びの選択肢が拡大

販売中の、ベージュ系（クリスタルベージュ）とピンク系（クリスタルピンク）の耳ひもを本体色と異なる色相とし、服装や装飾とも組み合わせやすく、お好みやTPO（時・場所・場合）に応じてご使用いただけるようにしました。

マスクの本体色は、いずれも艶やかさと光沢を備え、季節を問わず普段使いしやすい淡めのカラーです。光があたると輝き感が増し、艶やかさが際立つ特性がありますので、普段使いしやすい上品な色合いのマスクとなっています。

各商品ともに、服装や気分に応じて使い分けられるように、2色の耳ひものマスクを7枚ずつセットにしています。

また、伸縮性が高く、平たくやわらかい耳ひもを採用しており、マスク着用による耳近辺の肌への負担を軽減します。耳との接触面積が広いため、長時間、快適なつけ心地でご使用いただけます。



耳ひもについては、お客様からのご要望や社内調査、カラーの組み合わせの観点から、以下の色合い、ならびに着用時のコンセプトとしています。

(1) ベージュ系バイカラー

- ・耳ひも：グリーン系（アイビーグリーン）

落ち着いた印象と緑ならではのフレッシュさを併せ持ち、他のカラーとも調和しやすい暗い黄緑色です。カーキのような感覚で気軽に挑戦しやすいカラーをまとうことで、いつもの装いをグレードアップします。

- ・耳ひも：レッド系（ワインレッド）

大人っぽい色で高級感もあり、顔周りも引き締めて見せてくれる赤ワインのような深い赤色です。マスク本体の落ち着いたベージュに差し色のワインレッドを取り入れることで、ファッションに上品な華やかさを添えます。



(2) ピンク系バイカラー

- ・耳ひも：グレー系（スカイグレー）

顔を明るく魅せられるピンクと合わせることで、落ち着いた印象と透明感を引き出してくれる青みの明るいグレーです。ピンクは可愛らしい印象のためらうという方にもお試しください。やすい組み合わせです。

- ・耳ひも：レッド系（ワインレッド）

大人っぽい色で高級感もあり、顔周りも引き締めて見せてくれる赤ワインのような深い赤色です。同系色のピンクとも相性が良く、やわらかい雰囲気の中に、さりげなく大人びた印象をプラスしてくれます。



2. 口元の空間をしっかりと確保。呼吸しやすく快適なつけ心地を実現

立体クリスタル形状により、一般的なプリーツ形状のマスクと比べて、口元により広い空間を確保。また、外側の不織布に形状保持力が高く型崩れが少ない材料を使用することで、口元の空間を長時間維持します。これにより、呼吸しやすく、かつ、唇や口元周辺の肌が過度にマスクに接触することなく、清潔で快適なつけ心地を長時間維持します。

●イラストはイメージです



マスクを外した際には、口元側の不織布が内側に閉じこむように、折りたたんで収納することができます。衛生面で安心、かつ、マスクの内側が露出しないため見栄えも良く、周囲への配慮にも繋がります。



●画像のマスク色は、販売中のホワイト系です。

3. 花粉やウイルス飛沫などを99%以上カットするフィルターや抗菌加工の採用で衛生的

(1) 花粉やPM2.5、ウイルス飛沫、微粒子の侵入を99%以上カットするフィルターを採用

花粉やPM2.5、さらに微小なウイルスや微粒子の侵入を不織布フィルターによって、しっかりとガードします。せきやくしゃみによる飛沫拡散を防ぐのにも効果的です。VFE試験、BFE試験、PFE試験、花粉捕集効率試験の4つのフィルター捕集効率試験において、99%以上のカット率を実現しています※4。また、立体構造を採用しているため、顔にフィットしやすく、隙間からの花粉やPM2.5、ウイルス飛沫、微粒子の侵入を抑制します。


さらに、不織布の各層に撥水性を持たせることで、湿気によるマスクのフィルター性能（静電的な集塵性能）の低下抑制、飛沫の拡散防止といった効果を高めています。

※4 フィルター捕集効率試験による性能評価、および評価方法は次の通りです [(一財) カケンテストセンター試験結果]。
・ウイルス飛沫捕集効率99%以上 (VFE試験) ・バクテリア飛沫捕集効率99%以上 (BFE試験)
・微小粒子捕集効率99%以上 (PFE試験) ・花粉粒子捕集効率99%以上 (花粉捕集効率試験)
(VFE: Viral Filtration Efficiency, BFE: Bacterial Filtration Efficiency, PFE: Particle Filtration Efficiency)

(2) 銀イオンの抗菌作用により、マスク表面での細菌の増殖を抑制

最外層の不織布（外側のスパンボンド）には、無機（銀）系抗菌剤を配合しました。この抗菌剤に含有する銀イオン(Ag⁺)の作用により、マスク表面での細菌の増殖を抑えます。

●イラストはイメージです

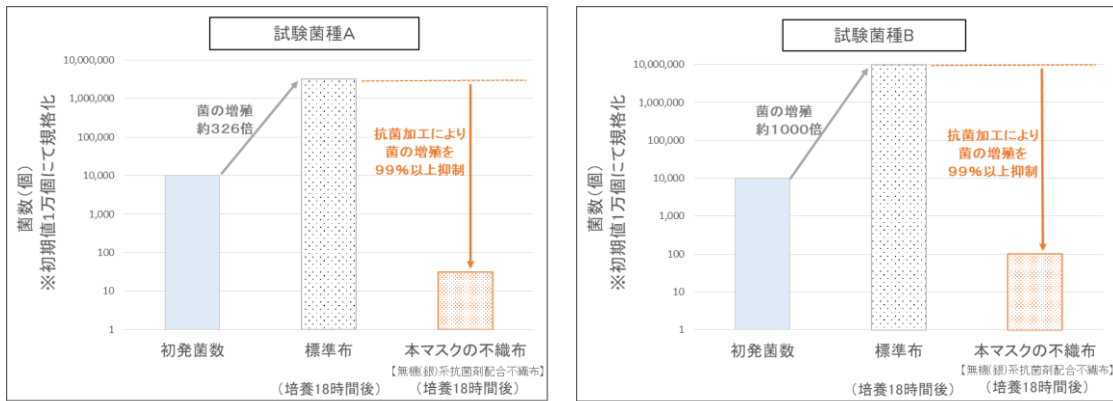

2種類の試験菌種による抗菌性能試験の結果※5

- ※5 (一社)日本衛生材料工業連合会が定める抗菌性能試験(試験方法: JIS L1902、菌液吸収法)の評価結果は次の通りです
 [(一財)カケンテストセンター試験結果]。
 ・【試験菌種A】抗菌活性値: 5.0 (抗菌性能基準: 2.0以上)、増殖値: 2.5 (成立条件: 1.5以上)、培養時間18時間
 ・【試験菌種B】抗菌活性値: 5.0 (抗菌性能基準: 2.0以上)、増殖値: 3.0 (成立条件: 1.5以上)、培養時間18時間

■ その他の特長

・ほお(頬)からあご(顎)にかけてのフェイスラインをシャープに演出

六角形をベースとした立体構造(立体クリスタル形状※6)の採用により、両側のほおからあごにかけて鋭角的なフェイスラインを形作ることによって、シャープで端正なイメージを演出します。

●イラストはイメージです



立体クリスタル形状のイメージ
 (左:水晶、右:シャープクリスタルマスク)

・ぴったりフィットのノーズフィッター

着用時に鼻の形に合わせて折り曲げるノーズフィッターを、鼻にフィットしやすい位置に設定しています。形状保持力が高く、鼻のラインにぴったりフィットするため、マスクと顔の間隙を減らし、花粉やPM2.5、ウイルス飛沫などの侵入やメガネの曇りを抑えます。

・ステッチ調整

鼻の部分に施されたステッチ（縫い目）を利用して不織布を下方方向に折り込むことで、マスクの縦方向のサイズ調整が可能です。個人ごとにフィット感の高いポジションでマスクを装着いただけます。



ステッチによるサイズ調整

●画像のマスク色は、販売中のホワイト系です。

・マスク1枚ごとに個別包装

1枚ごとに個別包装していますので、衛生面でより安心してお使いいただけます。

・当社三重工場内のクリーンルームで生産した「国産マスク」

液晶パネルも製造可能な当社三重工場（三重県多気郡多気町）内のクリーンルームで生産しています。クリーンルーム内は、チリやホコリなどが極端に少ない清潔な環境であり、安心してマスクをお使いいただけます。



■ 商品仕様 [(一社) 日本衛生材料工業連合会自主基準による表示]

品名	マスク [商品名：不織布マスク (ふつうサイズ)]	
形名	MA-C215-CX (ベージュ系)	MA-C215-PX (ピンク系)
素材名	本体およびフィルター (不織布：ポリプロピレン) 耳ひも部 (ポリウレタン、ナイロン、ポリエステル) ノーズフィッター (ポリエチレン)	
枚数	14枚	14枚
耳ひも色	グリーン系 7枚、レッド系 7枚	グレー系 7枚、レッド系 7枚
製造者名	シャープ株式会社	
包装材の材質	紙 (化粧箱)、ポリプロピレン (個別包装)	
抗菌剤の種類	無機(銀)系抗菌剤	
抗菌加工部位	マスク外側 (“SHARP”ロゴが正しく読める側) に使用	

本体サイズ (H × W) は、約82 × 210 mm (折りたたみ時) となります。

● 抗菌機能は、すべての細菌の増殖を抑制するものではありません。

シャープの「不織布マスク」について <https://jp.sharp/mask/>